

## Silla de Ruedas estándar

Modelo: 5626

### Marca

Mass®/Global Healthcare

### País de origen

China

### Garantía

5 años en caso de falla de fábrica



											
<b>65</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>92</b>	<b>105</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>120</b>
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kilos	kilos	kilos

### Descripción

Silla de ruedas, diseñada para brindar soporte a usuarios que requieran asistencia en movilidad y/o desplazamiento. Ruedas configuradas en maciza según la necesidad del usuario.

BIOMED es distribuidor autorizado en Chile de Global Healthcare®



## Especificaciones técnicas

Silla de ruedas versátil, robusta y liviana (peso 19 kg.) Incluye tapiz de tela Oxford, apoya brazos bi-direccionales que permiten una mejor transferencia del usuario y/o paciente de hasta 120 kg.



### Estructura

Silla de ruedas manual de adulto con marco estructural de acero.



### Plegado

Incluye mecanismo de plegado fácil y rápido, reduciendo espacio de almacenamiento



### Cruceta

Incluye doble cruceta tubular para brindar mayor resistencia



### Bastones

Bastones para empuje con manillas ergonómicas de goma antideslizante



### Asiento

Fabricado en tela oxford sintética, acolchada y lavable



### Respaldo

Incluye franja reflectante y bolsillo





**Frenos**

Bi laterales de palanca y ajustables en la horizontal



**Apoya brazos**

Diseño corto y rebajado abatible, plegable al respaldo



**Apoya brazos**

Incluye proyector lateral que evita que el usuario o su ropa entren en contacto con la rueda



**Apoya piernas**

Abatibles y desmontables para transferencia del usuario



**Seguridad**

Protector de pantorrillas para evitar deslizamientos hacia atrás



**Reposapiés**

Ajustable en altura con sistema de fijación de perno



**Reposapiés**

Batientes de dos hojas, regulables en altura



**Llantas**

24,5" material  
plástico modelo  
Mag



**Ruedas traseras**

Macizas



**Ruedas delanteras**

Macizas de 8"  
(20cm) pulgadas  
multidireccionales



**Ruedas traseras**

Incorpora aro de  
autopropulsión



**Horquilla**

De rueda delantera  
con opciones de  
regulación de altura en  
2 posiciones



**Set de herramientas**

Para configurar partes  
personalizadas, ajuste  
de reposapiés en  
altura y desmonte de  
tapiz



**Packaging**


Alto : 95 cm  
Ancho : 28 cm  
Largo : 82 cm  
Peso total: 20.5 kg  
Empaque :1 unidad





## Características y dimensiones

**Alto total de la silla: 92 cm**

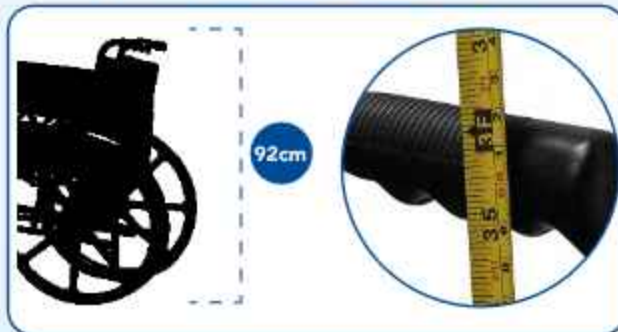

**Largo total de la silla: 105 cm**



**Ancho total de la silla: 65.5 cm**



**Alto del piso al asiento: 50 cm**



**Ancho del asiento: 46 cm**



**Ancho del asiento plegado: 27 cm**





### **Mantenimiento y cuidado**

Se sugiere revisar su silla de ruedas cada 6 meses  
Puede relizar la mantención solo o con ayuda de otras personas:

- Quite el polvo de todas las superficies y mecanismos
- Aceite el mecanismo de las palancas de freno, elementos móviles de enclavamiento
- Revise que todas las uniones atornilladas estén fijas

### **Precauciones**

- No deje la silla de ruedas bajo la luz solar o cerca de fuentes de calor como estufas, chimeneas u otros.
- Utilice solo un paño húmedo para la limpieza de su silla. No utilice productos abrasivos, revise periódicamente las ruedas y frenos, con el fin de evitar accidentes.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- Esta silla no puede apilarse. Respete el peso máximo establecido.
- Esta silla de ruedas **NO** está prevista para ser usada como asiento en un vehículo de motor.